

GF. glove factory

GF. cosmetic glove


TEXTILE KOSMETIKHANDSCHUHE FÜR HANDPROTHESEN



GF glove factory GmbH | Breite Straße 155 | 76135 Karlsruhe

Tel.: +49 721 161 784 62 | info@glovefactory.de

www.glovefactory.de

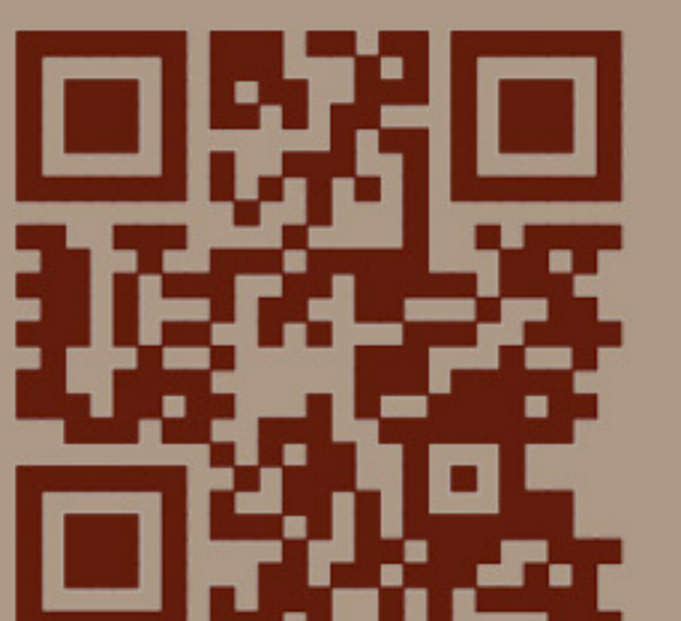

Die textilen Kosmetikhandschuhe **GF. cosmetic gloves** sind aus einem hochelastischen Polyamid/Lycra®-Gestrick gefertigt und deshalb besonders für hochbewegliche Handprothesen mit Einzelfingerbeweglichkeit geeignet. Das zweiteilige Handschuhsystem besteht aus einem Unterhandschuh und dem kosmetischen Oberhandschuh, der ein detailliertes, natürliches Hautbild abbildet. Diese Linie der **GF. cosmetic gloves** ist speziell auf die Maße der VINCENT-Handprothesen angepasst. Darüber hinaus sind aber auch Sonderanfertigungen für Partialhandprothesen oder Prothesen anderer Hersteller möglich.

Die Eigenschaften

- Detailliertes, natürliches Hautbild mit geprägten Fingernägeln.
- Hohe Elastizität durch Lycra®-Fasern und elastische Nähte.
- Rutschhemmende Handinnenfläche ermöglicht ein sicheres, rutschfreies Zugreifen.
- Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzung durch wasserabweisende Imprägnierung.
- Die Oberhandschuhe sind in drei Längen und mit unterschiedlichem Armumfang verfügbar.

Die Vorteile

- Die hohe Elastizität des textilen Kosmetikhandschuhs ermöglicht die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Prothese.
- Minimale Faltenbildung, da sich das Textil an die Prothese vorgespannt anlegt.
- Hautähnliche Optik.
- Anpassung der Handschuhfarbe an eigene Hautfarbe durch Auswahl verschiedener Hauttöne des Handschuhs.
- Einfacher Handschuhwechsel.
- Waschbar.

Zusätzliche Optionen

- Individuelle Anpassung des Handschuhs für Partialhandsysteme.

Haltbarkeit

- Je nach Nutzungsgrad kann ein Kosmetikhandschuh 2-8 Wochen getragen werden.
- Die Lebensdauer eines Handschuhpakets (4x Kosmetikhandschuh + 2x Unterhandschuh) entspricht etwa die eines Standard-Silikonhandschuhs.

